

ERŐT AD A MOZGÁSHOZ, ESÉLYT A FELÉPÜLÉSHEZ

KINETEC KINEVIA™ TERMÉKCSALÁD



BEMUTATKOZIK AZ ÚJ KINETEC KINEVIA™ TERMÉKCSALÁD



A mozgásterápia újragondolva

A Kinetec® új Kinetec Kinevia™ termékcsaládja a mozgásterápia innovációjának kiemelkedő példája. A fejlett rehabilitációs megoldásairól ismert Kinetec úgy tervezte meg a Kinetec Kinevia™ termékcsaládot, hogy sokoldalú – aktív, passzív és asszisztált – terápiás módokat kínáljon az egyéni igényekhez igazítva.

Intuitív technológiájával, játékosítási és virtuális valóság opcióival az új Kinetec Kinevia™ termékcsalád biztonságos, hatékony gyakorlást tesz lehetővé, fejlesztve az erőt, a mozgékonyt és a jóllétet. Jól tükrözi a Kinetec küldetését: átalakítani a rehabilitációt és jobbá tenni az emberek életét.

Minden pillanatban, minden nap.

Miért mozgásterápia?

A mozgásterápia olyan kezelési módszer, amely a mozgást használja fel az egészség és a fizikai funkciók javítására.

Célja az izmok erősítése, a mozgékonyt javítása, a fájdalom csökkentése, valamint a sérülés vagy betegség utáni felépülés támogatása. Az egyéni igényekhez igazított mozgásterápia különösen előnyös mozgásszervi, neurológiai vagy krónikus betegségekben szenvedők számára.

A páciens képességeitől függően aktív, passzív vagy asszisztált gyakorlatok állnak rendelkezésre a funkciók helyreállítására és a későbbi szövődmények megelőzésére. A mozgásterápia számos előnnyel jár mind a testi, mind a lelki jóllét szempontjából.

Az új Kinetec Kinevia™ termékcsaládot a mozgásterápia magasabb szintre emelésére tervezték: a gyakorlási módok sokoldalú választékát kínálja, minden páciens igényeihez igazítva. Akár aktív részvétellel, passzív mozgással vagy asszisztált mozgással, a Kinetec Kinevia™ termékcsalád egyenletes, kontrollált és biztonságos gyakorlást tesz lehetővé. Fejlett technológiájának köszönhetően a páciensek pontosan végezhetik a terápiás feladatokat, ami támogatja az izomerősítést, a jobb keringést és az ízületi mozgékonyt.

Az új Kinetec Kinevia™ termékcsalád terápiába építésével a páciensek gyorsabban és eredményesebben épülhetnek fel, visszanyerhetik funkcionális képességeiket, javul a közérzetük, és nagyobb önállóságra tehetnek szert.

JAVALLATOK



Szklerózis multiplex (SM)

Személyre szabott mozgásterápiát kínál szklerózis multiplexben (SM) szenvedőknek: segít csökkenteni a spaszticitást, javítja a mozgékonyt és az általános közérzetet.



Stroke

Személyre szabható mozgásterápiával segíti a stroke-on átesett pácienseket: támogatja az izomzat regenerálódását, javítja a mozgékonyt, és elősegíti az idegrendszeri rehabilitációt a nagyobb önállóság érdekében.



Paraplegia

Passzív és asszisztált mozgásterápiával támogatja a paraplegiás pácienseket: javítja a keringést, megőrzi az ízületek hajlékonyságát és megelőzi az izomsorvadást.



Izombetegségek

Személyre szabott mozgásterápiával segíti az izombetegségben szenvedőket: javítja az izomerőt, csökkenti a merevséget és megőrzi a funkcionális mozgékonyt.

Izombetegségek



“ A Kinetec Kinevia™ mozgásterápiás tréner jól használható különféle bénulások, illetve a karok/lábak funkcióvesztésével járó neuromuszkuláris betegségek esetén. ”

Ulm – RKU Egyetemi és Rehabilitációs Klinikák
Ulm, 2013. 12. 16.



Parkinson-kór

Kontrollált, ritmikus mozgásterápiával segíti a Parkinson-kórban szenvedőket: csökkenti a merevséget, javítja a mozgékonyt és támogatja a motoros funkciókat.



Demencia

Kíméletes, strukturált mozgásterápiával támogatja a demenciában szenvedőket: javítja a keringést, megőrzi a mozgékonyt, a rendszeres fizikai aktivitás révén pedig támogatja a kognitív jóllétet.



Műtét utáni rehabilitáció

Kíméletes, személyre szabható mozgásterápiával segíti a műtét utáni rehabilitációt: csökkenti a merevséget, javítja a keringést, és biztonságosan, hatékonyan állítja helyre a mozgékonyt.



Ortopédia

Személyre szabott mozgásterápiával támogatja az ortopédiai rehabilitációt: javítja az ízületi mozgékonyt, erősíti az izmokat, és elősegíti a sérülések vagy műtétek utáni felépülést.



Artrózis

Kis terhelésű mozgásterápiával segíti az artrózisban szenvedőket: csökkenti az ízületi merevséget, enyhíti a fájdalmat és javítja a mozgékonyt.



Kondíciómegőrzés

Sokoldalú mozgásterápiával támogatja az erőnlétet: növeli az izomerőt, javítja a hajlékonyságot, és elősegíti az általános fizikai jóllétet.

ELŐNYÖK

A Kinetec Kinevia™ termékcsalád számos előnyt kínál, így a mozgásterápia és a rehabilitáció nélkülözhetetlen eszköze. A mozgékonyt, a hajlékonyságot és az izomerőt javításával támogatja a sérülés vagy műtét utáni felépülést.

Az izomtónus és a spazmusok szabályozásával segít csökkenteni a fájdalmat, miközben megelőzi az ízületi merevséget és az összenövéseket.

A Kinetec Kinevia™ termékcsalád a koordinációt és az egyensúlyt is javítja, amelyek kulcsfontosságúak a funkcionális önállóság visszanyeréséhez. Kis terhelésű gyakorlatai serkentik az anyagcserét és a vérkeringést, támogatják az általános egészséget, a motoros kontroll javításával pedig gördülékenyebb, természetesebb mozgást tesznek lehetővé.

A testi előnyökön túl a Kinetec Kinevia™ a lelki jóllétet is erősíti, mivel segít a felhasználóknak visszanyerni önbizalmukat és önállóságukat a felépülés során.

SPAZMUSVÉDELEM

A Kinetec Kinevia™ termékcsalád fejlett, 6 fokozatú spazmusérzékelő rendszerével a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja.

Ez az intelligens rendszer folyamatosan figyeli a felhasználó mozgását, és valós időben alkalmazkodik, így biztonságos és érzékenyen reagáló gyakorlást biztosít. A páciens igényeitől függően a rendszer képes **megállítani**, **megfordítani** vagy **folytatni a mozgást**, így mindig az állapotának leginkább megfelelő beavatkozást alkalmazza.

Ez az innovatív funkció segít megelőzni az izomgörcsöket és minimalizálni a kellemetlenséget, dinamikus és adaptív megoldást kínálva a biztonságos rehabilitációhoz és gyakorláshoz, miközben minden mozdulat során megőrzi a **páciens** kényelmét és **biztonságát**.

6 fokozatú spazmus-
érzékelő rendszer



KLINIKAI FELHASZNÁLÁS

Az új Kinetec Kinevia™ termékcsaládot klinikai környezetre tervezték: pontosságot és rugalmasságot kínál a páciensek eltérő igényeinek kiszolgálására. A kíméletes passzív mozgatótól az aktív részvételig terjedő terápiás lehetőségeivel biztonságos, személyre szabott felépülést biztosít szakmai felügyelet mellett.

Asszisztált mód

Az **asszisztált mód** különösen előnyös: lehetővé teszi, hogy a páciensek saját tempójukban építsék újra erejüket és koordinációjukat, minimalizálva a túlterhelés vagy sérülés kockázatát. Ideális műtét utáni felépüléshez, neurológiai betegségek kezeléséhez vagy sérülés utáni mobilitás visszanyeréséhez.

A klinikai használat előnyei:

- Kiválóan alkalmas hosszú távú használatra fizioterápiás és rehabilitációs klinikákon.
- A fejlett funkciók megbízható teljesítményt biztosítanak.
- Javítja a mozgékonyt, az erőt és az általános fizikai funkciókat.
- Támogatja a magas színvonalú ellátást, hozzájárulva a jobb terápiás eredményekhez és a páciensek elégedettségéhez.

A mozgásterápia
csupa előny



OTTHONI FELHASZNÁLÁS

A Kinetec Kinevia™ az otthoni rehabilitációt egyszerre teszi praktikussá és hatékonyá. Az ismerős környezetben végzett gyakorlás segít csökkenteni a stresszt, és javítja a kezelési terv betartását.

Gyorsabb felépülés

Az otthoni rehabilitáció erősíti az önállóságot, mivel szükségtelenné teszi a gyakori és fárasztó utazást, így a terápia könnyebben beilleszthető a napi rutinba.

Ez a kényelem rendszeresebb kezeléseket tesz lehetővé, ami felgyorsíthatja a felépülést és javíthatja az eredményeket, különösen a korlátozott mozgásképességű pácienseknél.

Ösztönzi a család bevonását

Az otthoni használat előnyei:

- Rehabilitáció ismerős környezetben.
- Nincs szükség gyakori, fárasztó utazásra, ez erősíti az önállóságot.
- Könnyebben beilleszthető a terápia a mindennapi rutinba.
- Elérhető megoldás a korlátozott mozgásképességűek számára.
- Lehetővé teszi a hozzátartozók bevonását, akik lelki támaszt nyújtanak és növelik a páciens motivációját.

VÁLASZTHATÓ GYAKORLÁSI MÓDOK



AKTÍV

Az **aktív mód** 20 fokozatban állítható ellenállást kínál, így a páciensek fokozatosan fejleszthetik erejüket és állóképességüket.

Ez a mód tökéletes az **izomerő újraépítéséhez**, a motoros kontroll fejlesztéséhez és a koordináció javításához.

Az ellenállási szintek rugalmas beállításával a páciensek saját tempójukban érhetik el terápiás céljaikat.



PASSZÍV

Passzív módban a Kinetec Kinevia™ erőfeszítés nélküli mobilizálást tesz lehetővé: az izmokat és ízületeket kíméletesen mozgatja, a páciens aktív közreműködése nélkül.

A passzív mód **támogatja a korlátozott mozgásképességet**, ideális csökkent teherbírás esetén.

Emellett javítja a keringést és a véráramlást, valamint segíti az izmok ellazulását a jobb általános felépülés érdekében.



ASSZISZTÁLT

Az **asszisztált mód** egyedülálló funkció, amely gördülékeny átmenetet biztosít a passzív és az aktív mód között.

Célzott rásegítéssel mobilizálja és **erősíti** még a meggyengült izmokat is.

Ez a folyamatos mozgás – akár részben rásegített, akár aktívan hajtott – önbizalmat ad, és segít a pácienseknek fokozatosan és biztonságosan visszanyerni mozgékonyágukat.

MINDEN EGYBEN

A Kinetec Kinevia™ egyedülálló módon **három** egyértelmű gyakorlási módot kínál – passzív, aktív és asszisztált –, így a páciensek kiválaszthatják a számukra megfelelőt, a készülék pedig ehhez igazodik.

A Kinetec Kinevia™ termékcsalád páratlan sokoldalúságot kínál: a terapeuták és a páciensek a rehabilitációs igények változásával zökkenőmentesen válhatnak a módok között.

A felépülés minden szakaszát támogatja, a korai rehabilitációtól a haladó izomerősítésen át a hosszú távú állapotmegőrzésig.

Páratlan rugalmasság az erő és a mozgékonyág visszanyeréséhez



KEZELŐFELÜLETEK



VÉGTAGVÁLASZTÁS

A **végtagválasztó** felületen a felhasználók könnyen kiválaszthatják és testre szabhatják az egyes végtagokra irányuló terápiát, célzott és hatékony rehabilitációt biztosítva.



EDZÉSMÓD

Az **edzésmód** képernyő intuitív felületet biztosít a terápiás módok kiválasztásához és testreszabásához.



TELJES FELÜLET

A Kinetec Kinevia™ termékcsalád rugalmas kezelőfelülete különböző igényekhez igazodik. A **teljes felület** a rehabilitációs paraméterek precíz beállítását teszi lehetővé.

Elérhető funkciók:

- Fordulatszám (ford./perc)
- Időzítő
- Ellenállás
- Forgásirány-váltás
- Spazmusvédelem
- Pozicionálási segéd
- Megtett távolság
- Leadott energia
- Elégetett kalória
- Szimmetria
- Szimmetriajáték
- Aktivitáсарány (felh./gép)



EGYSZERŰSÍTETT FELÜLET

Az **egyszerűsített felület** gyors és könnyen áttekinthető kijelzést kínál, amely a beállításokban testre szabható.

**Indítsa el a terápiát
mindössze
három kattintással!**



Videós útmutató



Videós útmutatókkal segítjük a különböző módok és modulok egyszerű beüzemelését.

KINETEC KINEVIA AL™

A Kinetec Kinevia AL™ sokoldalú, könnyen kezelhető készülék, amelyet a rehabilitációs igények széles körére terveztek; pontosságot, kényelmet és alkalmazkodóképességet kínál.

Intuitív kialakításának és fejlett funkcióinak köszönhetően segíti a pácienseket terápiás céljaik hatékonyabb elérésében, mivel természetes mozgásmintákat támogat, és fokozza a rehabilitációs foglalkozások iránti elköteleződést.

A Kinetec Kinevia AL™ ideális megoldás otthoni használatra és költségtudatos felhasználóknak.

Kompakt és ergonomikus kialakítása hatékony mozgásterápiát biztosít.

Főbb jellemzők:

- Aktív/passzív/asszisztált mozgás
- 7"-os képernyő
- Kar-hajtókarok – 1 pozíció
- Fix karmodul
- Karmodul-magasságállítás
- Láb-hajtókarok – 2 pozíció
- Standard pedálok (pár)



Cikkszám: 46210100



Cikkszám: 46210101

Vízszintes karmodul-állítás



Lehetővé teszi a Kinetec Kinevia AL+™ karmodulja és a páciens közötti távolság vízszintes beállítását.

Tartozékok:

- 10"-os képernyő
- Vízszintesen állítható karmodul
- Rásegítéses karmodul-magasságállítás (gázrugó)
- Prémium pedálok lábrögzítő rendszerrel (pár)
- Lábszártámaszok (pár)
- Borulásgátló rögzítők (pár)

KINETEC KINEVIA AL™ : MŰSZAKI ADATOK

Termék tömege	35 kg
Maximális magasság	125 cm
Maximális hosszúság	72 cm
Maximális szélesség	63 cm
Max. páciens testsúly	135 kg
Képernyőméret	7" (17,8 cm)

KINETEC KINEVIA AL+™ : MŰSZAKI ADATOK

Termék tömege	41 kg
Maximális magasság	130 cm
Maximális hosszúság	99 cm
Maximális szélesség	63 cm
Max. páciens testsúly	135 kg
Képernyőméret	10" (25,4 cm)

SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER

Ha egy terápiás tréner szórakoztató rendszerrel egészítünk ki, a foglalkozások vonzóbbá és élvezetesebbé válnak, nő a motiváció, és a páciens figyelme is elterelődik a fájdalomról.

Szórakoztató rendszerünk valóban személyre szabott élményt nyújt: interaktív játékok széles választékát és a virtuális valóság magával ragadó erejét kínálja.

**Magával ragadó,
intelligens és határtalan
rehabilitáció!**



A korszerű rehabilitációs technológiának köszönhetően a szórakoztató rendszer minden pácienshez alkalmazkodik, életkortól és fizikai állapottól függetlenül.

Így a különböző orvosi szakterületek eltérő igényeit is kielégíti. A fizikai és kognitív stimuláció ötvözésével átfogó és hatékony terápiás megközelítést kínál.

Játékos jellege a foglalkozás teljes ideje alatt ösztönzi a páciens aktív részvételét, miközben valódi kognitív stimulációt nyújt.

KÖNNYŰ KEZELÉS

Bluetooth-adatátvitel





MOTIVÁCIÓ ÉS ÉLMÉNY

Tucatnyi bejárható táj városban és vidéken, valamint saját videók hozzáadásának lehetősége.




JÁTEKOS ÉS ÖSZTÖNZŐ

Számos felfedezhető interaktív játék ösztönzi a páciens edzését.

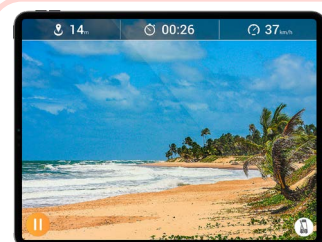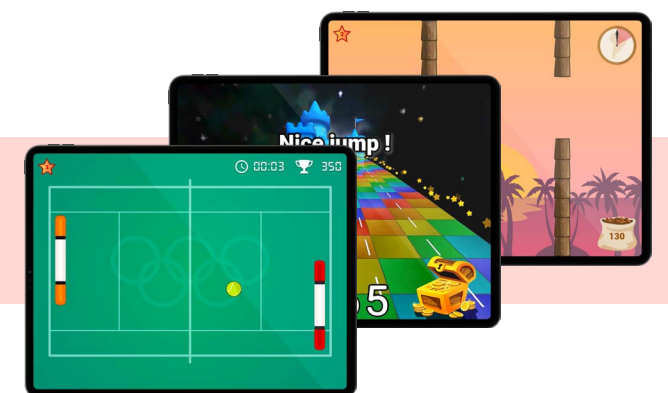


TÚRA

Változatos tájak.
Egyedi tájak.
Állóképesség-fejlesztés.

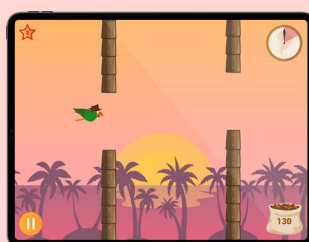


JÁTÉK

Gyakorlás játszva.
Gyorsaságfejlesztés.
Koordinációfejlesztés.

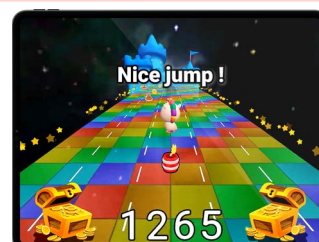

KOGNITÍV

Koncentráció.
Reakciókészség.

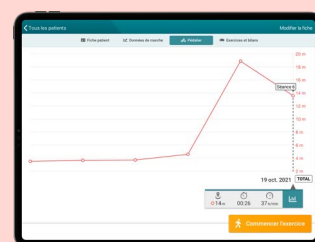

ELEMZÉS

Teljesítménykövetés.
Felhasználói profilok.

SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER

Az ezyGain szórakoztató rendszernek köszönhetően a Kinetec Kinevia™ termékcsalád virtuálisvalóság-készlettel is felszerelhető.

Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a páciensek stimuláló vagy nyugtató virtuális környezetekbe merüljenek, gazdagítva a rehabilitációs élményt és fokozva az elköteleződést a foglalkozások során.

Virtuális valóság (VR)

A páciens teljesen virtuális környezetbe merül

- Teljes elmerülés a jobb összpontosításért
- Erősebb érzelmi bevonódás
- Elérhetetlen vagy szorongást keltő környezetek stimulálása
- Relaxáció nyugtató környezetekben



Hemineglect kezelése



Tájékozódás fejlesztése



Felkészülés a valós környezetbe való visszatérésre



Az ezyGain VR-csomag tartalma

- Többpáciens-licenc
- VR-headset
- Kontrollerek
- 13"-os iPad védőtokkal
- Állvány
- Tároló- és szállítótáska



Gyors telepítés

**Nincs szükség Wi-Fi-re
vagy internetre (kivéve
a távoli adathozzáférést
és az alkalmazásfrissítéseket).**



Cikkszám: 4610010263	EzyGain rendszerlicenc (egy páciens)
Cikkszám: 4610010255	EzyGain rendszerlicenc (több páciens)
Cikkszám: 4610010247	iPad 10"
Cikkszám: 4610010271	EzyGain VR-csomag (virtuális valóság)


EGYEDI KIALAKÍTÁS

Az egyedi kialakítás növeli a páciensek lelki komfortérzetét, mivel olyan készüléket kapnak, amelynek dizájnya harmonikusan illeszkedik a környezetükbe.

Segít csökkenteni az orvosi eszközökhöz gyakran társuló stigmát, és kellemesebbé teszi a használatot.

Mivel az egészségügyi intézmények esztétikai elképzeléseik szerint alakíthatják a dizájnt, a Kinetec Kinevia AL™ a terápiás igényekhez igazodik.

4670029387 - Egyedi kialakítás: Giraffy
4670029395 - Egyedi kialakítás: Lime
4670029402 - Egyedi kialakítás: Canary
4670029410 - Egyedi kialakítás: Teal
4670029428 - Egyedi kialakítás: Apricot

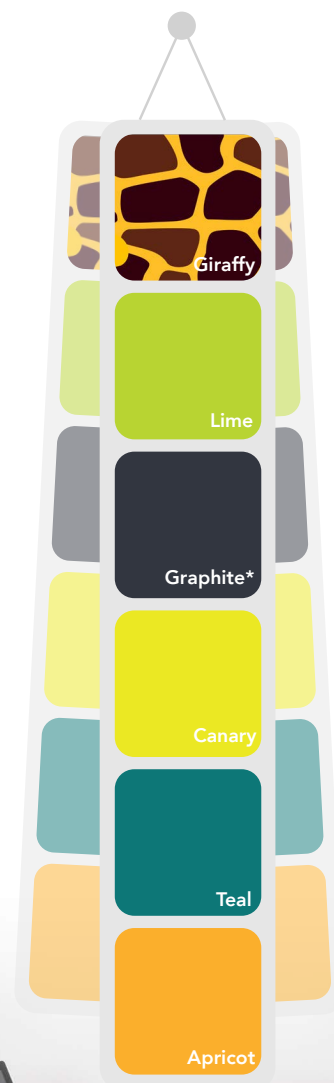

OPCIÓK

10"-OS KÉPERNYŐ

A 10"-os érintőképernyő javítja a gyakorlási paraméterek láthatóságát és kezelhetőségét: a gyakorlatok, statisztikák és beállítások könnyen nyomon követhetők, így a foglalkozások hatékonyabbak.

Cikkszám: 4670029303 - 10"-os képernyő (25,4 cm)



RÁSEGÍTÉSES KARMODUL-MAGASSÁGÁLLÍTÁS

Ez a gázrugós állítás kompenzálja a karmodul súlyát, egyszerűbbé téve a beállítást, miközben javítja a pontosságot, az ergonómiát és a felhasználói kényelmet.

Cikkszám: 4670028701 - Rásegítéses karmodul-magasságállítós (gázrugós)



Ezek az opciók csak a gyártás során rendelhetők.

Kiváló minőségű, esztétikus anyagok

* Alapszín.

FELSŐ VÉGTAGI OPCIÓK

3 POZÍCIÓS KARÁLLÍTÁS

A 3 pozíciós állítással a hajtókar hossza módosítható, így a mozgás a páciens egyéni igényeihez igazítható, ami elősegíti a rehabilitációt. Egy pár fogantyút tartalmaz.



Cikkszám: 4670029311 - 3 pozíciós állítás fogantyúkkal (pár)

ERGONOMIKUS MARKOLAT

Az ergonomikus markolatok optimális fogást biztosítanak. Csökkenti a csukló és az alkar terhelését, így kényelmesebb, gördülékenyebb és feszültségmentes felsőtest-edzést tesznek lehetővé.



Cikkszám: 4670029709 - Ergonomikus markolat (pár)



KESZTYŰ

A kesztyűk segítségével a páciens keze a készülék használata közben a helyén marad. 4 méretben kapható.

4665009972 (XS méret - db)
4665009964 (S méret - db)
4665009956 (M méret - db)
4665011026 (L méret - db)



KARVEZETŐ RENDSZER

A karvezető segít megtámasztani és stabilizálni a páciens felső végtagját a gyakorlás során. Hossza és szöge állítható, így kényelmes és biztonságos pozicionálást biztosít.



Cikkszám: 4670029519 - Karvezető rendszer (pár)

PRÉMIUM PEDÁL

A pedálpár optimális lábtámaszt biztosít. A műanyag pántok könnyen tisztíthatók.

Cikkszám: 4670028743 - Prémium pedál (pár)



3 POZÍCIÓS LÁBÁLLÍTÁS

A 3 pozíciós állítással a hajtókar hossza módosítható, így a mozgás a páciens egyéni igényeihez igazítható, ami elősegíti a rehabilitációt. Egy pár prémium pedált tartalmaz.

Cikkszám: 4670029329 - 3 pozíciós lábállítás prémium pedállal (pár)



LÁBRÖGZÍTŐ RENDSZER

A lábrögzítő rendszer egyetlen mozdulattal rögzíti a lábat a lábtartónak köszönhetően, amely egy gomb megnyomásával azonnal le- és felhajtható.

Cikkszám: 4670029501 - Lábrögzítő rendszer prémium pedálhoz (pár)



ALSÓ VÉGTAGI OPCIÓK

LÁBSZÁRTÁMASZ

A lábszártámaszok jobb kontrollt és stabilitást biztosítanak az alsó végtagok számára, segítve a páciens a kényelmes lábhelyzet megtartásában a gyakorlás során.

Cikkszám: 4670029345 - Standard lábszártámasz (pár)
Cikkszám: 4670029353 - Lábszártámasz prémium pedálhoz (pár)



BORULÁSGÁTLÓ RÖGZÍTŐ

A borulásgátló rögzítőpár a tréner talpához akasztva és a kerekesszékhez csatlakoztatva rögzíti a készüléket, megelőzve a használat közbeni véletlen eldőlést.

Cikkszám: 4670029361 - Borulásgátló rögzítő (pár)



MŰSZAKI ADATOK

	Kinetec Kinevia AL™	Kinetec Kinevia AL+™
Méretek		
Minimális magasság	109cm	114cm
Maximális magasság	124cm	129cm
Magasságállítás	Kézi	Rásegíteses
Hosszúság	70cm	70-81 cm
Szélesség	63 cm (65 cm csatlakozóval)	63 cm (65 cm csatlakozóval)
Talaj és láb-forgástengely távolsága		
Állítható	Nem	Nem
Magasság	33cm	33cm
Talaj és kar-forgástengely távolsága		
Állítható	Igen	Igen
Minimális magasság	87cm	87cm
Maximális magasság	101cm	101cm
Tömeg		
Készülék	35kg	41kg
Lábtartó		
Belső szélesség	12cm	13cm
Állítható távolság	Nem	Igen
Távolság (belső méret)	17.5 cm	17.5cm
Állítható pedálsugar	Igen	Igen
Pozíciók száma	2	3
Minimum	7cm	4.5cm
Maximum	12.5cm	13.5cm
Anyag	Rugalmas műanyag	Rugalmas műanyag
Fogantyúk		
Szélesség	12.5cm	12.5cm
Fogantyúk távolsága	24.6 cm	24cm
Állítható	Nem	Nem
Sugár	10.5 cm	10.5 cm
Anyag	Rugalmas műanyag	Rugalmas műanyag
Műszaki jellemzők		
Passzív sebesség	60 ford./perc	60 ford./perc
Ellenállási fokozat	1-20	1-20
Spazmusérzékenység	1-6	1-6
Elektromos jellemzők		
Tápegység	Beépített	Beépített
Bemeneti feszültség	100-240 V	100-240 V
Bemeneti frekvencia	47-63 Hz	47-63 Hz
Tápkábel hossza	3.50m	3.50m
Érintőképernyő		
Méret	7" (17.8cm)	10" (25.4cm)
Hangkimenet	Igen	Igen
Bekapcsolástól üzemkész állapotig	5 másodperc	5 másodperc
Dönthető	Igen	Igen
Forgatható	Nem	Nem
Garancia	2 év	2 év

KINETEC KINEVIA™ TERMÉKCSALÁD

Jelmagyarázat

- Tartozék
- Opció
- Nem alkalmazható



JELLEMZŐK		
	Kinetec Kinevia AL™	Kinetec Kinevia AL+™
ALSÓ VÉGTAGI OPCIÓK		
Prémium pedál	○	●
Cikkszám: 4670028743 (pár)		
3 pozíciós lábállítás prémium pedállal	○	●
Cikkszám: 4670029329 (pár)		
Lábrögzítő rendszer prémium pedálhoz	○	●
Cikkszám: 4670029501 (pár)		
Standard lábszártámasz	○	-
Cikkszám: 4670029345 (pár)		
Lábszártámasz prémium pedálhoz	○	●
Cikkszám: 4670029353 (pár)		
Borulásgátló rögzítő	○	●
Cikkszám: 4670029361 (pár)		
FELSŐ VÉGTAGI OPCIÓK		
3 pozíciós karállítás fogantyúval	○	○
Cikkszám: 4670029311 (pár)		
Ergonomikus markolat	○	○
Cikkszám: 4670029709 (pár)		
Karvezető rendszer	○	○
Cikkszám: 4670029519 (pár)		
Kesztyű (db)	○	○
Cikkszám: 4665009972 (XS) - 4665009964 (S) 4665009956 (M) - 4665011026 (L)		
GYÁRTÁSKOR RENDELHETŐ OPCIÓK		
10"-os képernyő	○	●
Cikkszám: 4670029303		
Rásegíteses karmodul-magasságállítás (gázrugó)	○	●
Cikkszám: 4670028701		
Egyedi kialakítás	○	○
Cikkszám: 4670029387 (Giraffy) - 4670029395 (Lime) 4670029402 (Canary) - 4670029410 (Teal) - 4670029428 (Apricot)		
SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER		
Szórakoztató rendszer	○	○
Cikkszám: 4610010263 (egy páciens) - 4610010255 (több páciens) 4610010247 (iPad 10") - 4610010271 (virtuális valóság)		



Látogasson el honlapunkra
www.kinetecinternational.com

 Gyártó:

Kinetec SAS

Zone Industrielle de Tournes
Rue Maurice Périn
F-08090 Tournes
Franciaország

Tel: +33 324 29 85 05
contact@kinetec.fr
www.kinetecinternational.com

kinetec[®]
brought to you by
MedFac