

Sara® Plus



A Sara Plus egy elektromos meghajtású álló helyzetbe segítő és emelő eszköz, amelyet aktív transzferekhez, egyensúly-, lépés- és járástréninghez terveztek.

ARJO MOBILITÁSI GALÉRIA



C



D

© Arjo 2019

C. Legalább az egyik lábán részlegesen tud terhelni. Hosszabb távolságra tolószéket használ.

D. Talpon nem terhelhető. Ha jól megtámasztják, ülni képes. További információért forduljon az Arjo-hoz.

- **A mobilitás fejlesztése gyakorlatokkal**

A levehető lábtartó lemez, valamint a karpihenő ív és a heveder támogatásával a Sara Plus az egyensúly, a lépés és a járás fejlesztését segíti.

- **Felsőtest-támogatás**

A karpihenő ív az emelőmechanizmus szerves része, amely további felsőtest-támogatást nyújt a felállás során.

- **Egy ápoló is elegendő**

A Sara Plus egyetlen ápoló általi kezelésre készült, így költséghatékony megoldást jelent az álló transzferekhez, a lépés- és járástréninghez.

- **Heveder megoldások**

A hevedert kifejezetten a Sara Plus-hoz tervezték. Biztonságos rögzítést biztosít az emelőhöz, amely a beteget vagy gondozottat a karpihenő ívhez közel tartja. Többféle heveder közül lehet választani: álló, transzfer/séta és lemosható kivitel.

- **Mérleg opcióként**

Az opcionális beépített mérleg megkönnyíti a rendszeres testtömegmérést.

Legfontosabb jellemzők

KARPIHENŐ ÍV

A karpihenő ív megtámasztja a beteg karját és felsőtestét, így a talpai mellett a vállán keresztül is képes megtartani a testsúlyát.

AKTÍV TÉRDPÁRNA

Az aktív térdpárna támaszt és stabilitást nyújt, ugyanakkor lehetővé teszi a térd természetes előre mozdulását és a boka hajlítását álláskor és leüléskor.

LEVEHETŐ LÁBTARTÓ LEMEZ

A levehető lábtartó lemez lehetővé teszi a lépés- és járástréninget úgy, hogy a beteg talpa közvetlenül a padlón van.



KETTŐS VEZÉRLÉS

Kettős vezérlés található az oszlopon és a kézívezérlőn. A kézívezérlő lehetővé teszi, hogy az ápoló a beteg közelében maradván mozgassa az eszközt, és a folyamat során végig szemkontaktust tartson.

MÉRLEG (OPCIÓ)

A mérleg a betegek testtömegének mérésére és terhelhetőségük nyomon követésére szolgál, amikor a Sara Plus-t lábtartó nélkül használják.

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Max. biztonságos terhelhetőség	190 kg	420 lb
Emelő tömege (akkumulátorral)	78.7 kg	173.5 lb
Min. tárolási magasság	1195 mm	47 in
Min. emelési magasság	906 mm	35 5/8 in
Max. emelési magasság	1497 mm	58 7/8 in
Külső szélesség, lábak zárva	646 mm	25 3/8 in
Külső szélesség, lábak nyitva	1107 mm	44 in
Belső szélesség, lábak zárva	534 mm	21 in
Belső szélesség, lábak nyitva	1002 mm	39 1/2 in
Szabad magasság a lábak alatt	116 mm	4 1/2 in
Alvázmagasság (padlótól)	30 mm	1 1/8 in
Emelő teljes hossza	1033 mm	40 5/8 in
Fordulási sugár	1235 mm	48 5/8 in
Emelő védettségi osztálya	IPX4	
Kézívezérlő védettségi osztálya	IPX7	
Akkumulátor	24V, 6 Ah	
Akkumulátortöltöttség-kijelző		
Üzemóra-számláló – a teljes használati időt órában jeleníti meg		
Vészleállító és rendszerhiba-felülbírálás		
Automatikus biztonsági leállítás akadályba ütközéskor		
Alacsony súrlódású görgők, a hátsó kettő fékezhető		

TARTOZÉKOK

Széles választékú mosható, eldobható és lemosható heveder áll rendelkezésre

WC-szék betét

Keskeny lábtartó deszka

Lábtartó deszka hosszabbító

Széles térdpárna


Térdpárna flanel huzat

Karrögzítő pánt

Lábrögzítő pánt

Opció: integrált mérleg

SZÜKSÉGES HELYIGÉNY

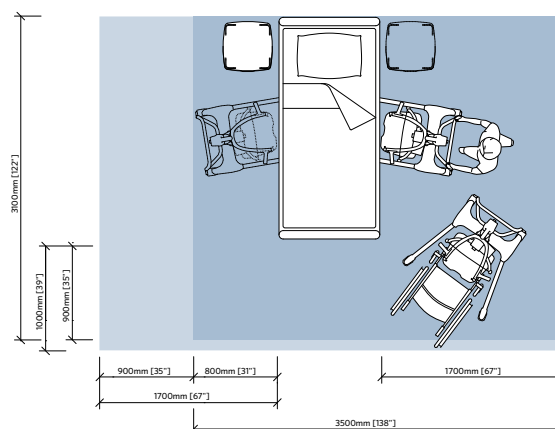

- A kék terület mutatja azt a minimális munkaterületet, amely lehetővé teszi, hogy az ápoló egy oldalról ergonomikusan használja a mechanikus segédeszközt.
- A világoskék terület a munkaterület kiterjesztését mutatja, amely mindkét oldalról hozzáférést biztosít a beteg, a segédeszköz és az ápoló számára.