

Walker®



A Walker támogatást nyújt az első lépés megtételéhez – mind a beteg vagy gondozott, mind a gyógytornász számára.

ARJO MOBILITY GALLERY



B

© Arjo 2019

B. Korlátozottan önállóan járóképes, járókeretet vagy mankót használhat.

További információért forduljon az Arjo-hoz.

- **Az első lépés**

A tornateremben, kezelőhelyiségben vagy osztályon használható eszköz, amely biztonságos körülményeket teremt az első lépés megtételéhez.

- **Magasság-állítás (hi-low funkció)**

A magasságállító funkció csökkenti az áthelyezéssel járó kockázatot mind a beteg, mind a gyógytornász számára, amikor a beteget álló helyzetbe emelik, illetve onnan leengedik.

- **Biztonsági és kényelmi jellemzők**

Az állítható fogantyúk stabil kapaszkodást biztosítanak a betegnek, a U-alakú asztal és a hát-/tartószíjak pedig megakadályozzák az elesést.

- **Egyenes kormányzás és fékek**

Az egyenes kormányzást biztosító szerkezet segíti a beteget az egyenes vonalú haladásban. A Walker két gurulókerekén fékekkel van felszerelve.

- **Szabad hozzáférés**

A Walker nyitott oldalai szabad hozzáférést biztosítanak a gyógytornász számára a beteg csípőjéhez, térdéhez és bokájához a járásgyakorlás során.

Fő jellemzők

TÁMASZTÓASZTAL

A puha, U-alakú támasztóasztal stabil felületet biztosít a rátámaszkodáshoz.

LAPÁTÜLÉS

Miután a beteg álló helyzetbe került, a lapátülés könnyen eltávolítható.

FOGANTYÚK


Az állítható fogantyúk biztos fogást tesznek lehetővé a beteg számára.

KÉZIVEZÉRLŐ

A Walker kézivezérlővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a gyógytornász a beteg közelében maradjon.

EGYENES KORMÁNYZÁS

Az egyenes kormányzás segíti a beteget az egyenes vonalú haladásban, és megkönnyíti a folyosón történő szállítást.

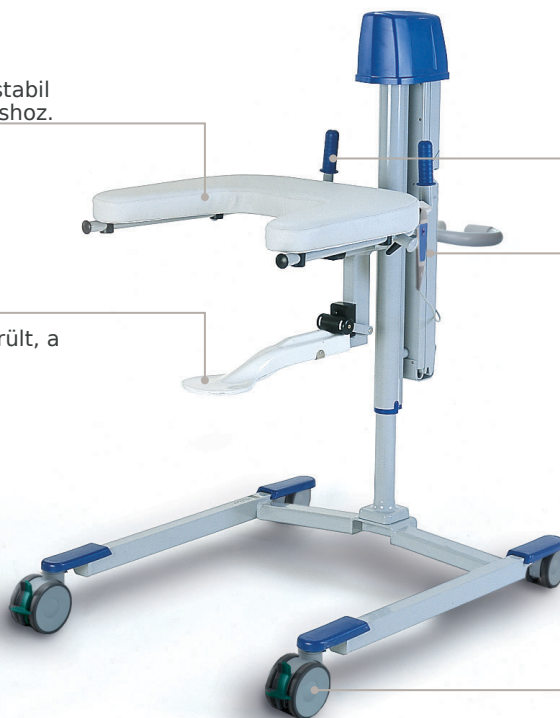

TERMÉKINFORMÁCIÓ


Max. biztonságos terhelhetőség	136 kg	300 lb
Emelő súlya (akkumulátorral)	53 kg	117 lb
Min. tárolási magasság	1165 mm	45 7/8 in
Külső szélesség, zárt lábakkal	843 mm	33 1/4 in
Belső szélesség, zárt lábbal	694 mm	27 3/8 in
Lábak szabad magassága (padlótól)	165 mm	6 1/2 in
Alvázmagasság (padlótól az alváz aljáig)	117 mm	4 7/8 in
Emelő teljes hossza	1040 mm	41 in
Fordulási sugár	1320 mm	52 in
Emelő védettségi osztálya	IPX4	
Kézivezérlő védettségi osztálya	IPX7	
Akkumulátor	24V, 4 Ah	

Vészleállító és rendszerhiba-felülbírlás

Automatikus biztonsági kikapcsolás akadályra süllyesztéskor (elektromos verziónál)

Alacsony súrlódású görgők, a hátsó kettő fékkel

HELYIGÉNY

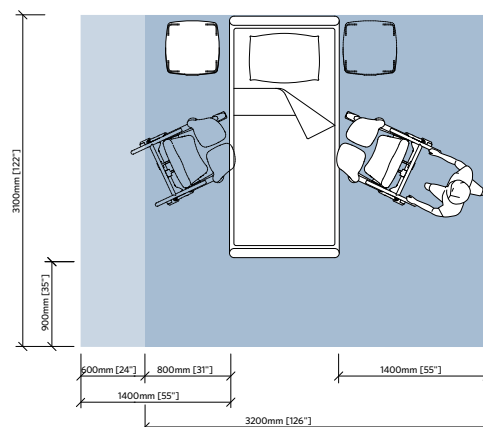

- A kék terület jelzi azt a minimális munkaterületet, amely lehetővé teszi a gondozó számára, hogy a mechanikus segédeszközt ergonomikusan, az egyik oldalról használja.
- A világoskék terület a munkaterület kiterjesztését mutatja, amely lehetővé teszi a tevékenységek végzését mindkét oldalról, megfelelő hozzáférést biztosítva a beteghez, a mechanikus segédeszközhöz és a gondozóhoz.