

HUMAGOR

www.gyogyszeresati.hu

**Mobil
segédeszköz**

VertiAID
VertiAID UNI



Ez a szórólap többek között olyan orvostechnikai eszközökre vonatkozó információkat tartalmaz, amelyeket képzett egészségügyi személyzetnek kell kezelnie, és amelyeket a használati útmutatónak vagy a címkének megfelelően kell alkalmazni.



A VertiAID / VertiAID Uni kézi működtetésű, mobil segédeszköz, amely a gondozók napi munkáját támogatja. Megkönnyíti a mindennapi feladatok elvégzését, különböző környezetekben használható, biztonságos álló helyzetű áthelyezést biztosít a felhasználó számára, és biztonságos munkakörnyezetet teremt az egészségügyi személyzetnek.

AZ ESZKÖZ AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:



**Kórházak és egyéb
egészségügyi intézmények**




**Gyógy-
üdülők**



**Ápolási
otthonok**



**Otthoni
használat**

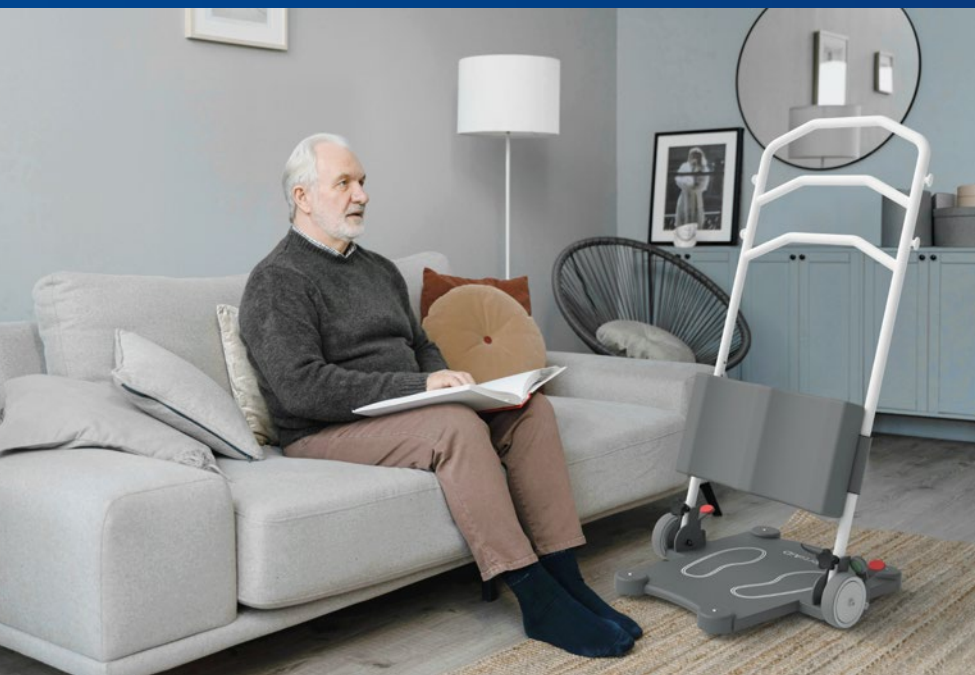

A VertiAID / VertiAID Uni mobil segédeszközt csökkent mozgásképességű betegek emeléséhez, mozgatásához és szállításához fejlesztették ki, növelve a felhasználók és a gondozók biztonságát és kényelmét. A stabilitásra, a megbízhatóságra és az egyszerű kezelhetőségre összpontosító eszköz átgondolt tervezést, valamint minőségbiztosítási rendszerrel támogatott, ellenőrzött gyártási folyamatokat képvisel.

FŐ JELLEMZŐK:

- **Álló helyzetű áthelyezés:** Az eszköz álló helyzetben teszi lehetővé az áthelyezést, így a felhasználó kényelmesen juthat át a szék, a kerekesszék, az ágy vagy a WC között.
- **Rövid távú áthelyezés:** A rövid távolságokra tervezett VertiAID / VertiAID Uni ideális a gyors áthelyezésekhez, miközben a folyamat során végig megőrzi a felhasználó méltóságát és kényelmét.
- **Célcsoport:** Különösen előnyös azoknak a betegeknek, akik önállóan vagy minimális segítséggel képesek felállni, például fájdalom, korlátozott ízületi mozgásterjedelem, merevség vagy izomgyengeség esetén.
- **Fokozott biztonság:** Alapvető megtámasztást nyújt az áthelyezés során, csökkenti az elesés és a sérülés kockázatát, és simább átmenetet biztosít a testhelyzetek között.



**magasságban állítható
térdtámasz**



**többfogású
fogantyú**



**alacsony
lábtartó**



**stabilizáló
övek**

A VertiAID / VertiAID Uni nélkülözhetetlen eszköz a gondozók és az egészségügyi szakemberek számára: biztonságos és hatékony megoldást nyújt az asszisztált áthelyezéshez, és jelentősen javítja a mozgásukban korlátozott személyek ellátásának minőségét.

ELŐNYÖK:

KÖNNYŰ ÁTHELYEZÉS

- **Manőverezhetőség:** A 2 nagy (12,5 cm átmérőjű) és 4 kis (3,5 cm átmérőjű) kerékkel az eszköz szűk helyeken is könnyen manőverezhető.
- **Sokoldalúság:** Az eszköz tolható, húzható és forgatható, ami megkönnyíti a gondozó munkáját a beteg áthelyezése és szállítása során.
- **Egyensúly:** Az eszköz könnyen mozgatható és nem billen meg, így kiküszöböli az egyensúlyvesztés és a beteggel együtt történő felborulás kockázatát.
- **Funkcionalitás:** Keskeny kialakításának köszönhetően a legtöbb szabványos ajtón könnyedén átfér, így sokféle környezetben használható.

BIZTONSÁG

- **Stabilitás:** A fékek leüléskor és felálláskor stabilitást biztosítanak, növelve a felhasználó biztonságát, a lábtartó pedig stabil alátámasztást nyújt a lábfejeknek, csökkentve a megcsúszás kockázatát.
- **Kényelem:** A párnázott térdtámasz és az ergonomikus fogantyúk biztos fogást nyújtanak, javítva az általános felhasználói élményt.
- **Megtámasztás:** A stabilizáló öv használatának lehetősége tovább növeli a beteg biztonságát és kényelmét.
- **Ergonómia:** Az eszköz biztonságos áthelyezést tesz lehetővé, ergonomikus munkakörnyezetet teremt a gondozó számára, és csökkenti a sérülés kockázatát.


TÖBBFUNKCIÓS HASZNÁLAT

- Biztonságos segítség a felálláshoz és az áthelyezéshez.
- A 3 szintes, többfogású fogantyú „létraként” szolgálhat, amely segíti a beteget a fokozatos felállásban vagy leülésben.
- Ideális otthoni, kórházi és ápolási intézményi használatra, sokféle területen magas funkcionalitást kínál.
- Tökéletes a betegek ágy, kerekesszék, WC és szék közötti áthelyezéséhez.
- Nélkülözhetetlen eszköz a gyakori betegáthelyezést igénylő helyzetekben.


FELHASZNÁLÓBARÁT KIALAKÍTÁS

- **Felhasználóbarát:** Az íves (3 szintű) fogantyúk biztos fogást nyújtanak, így különböző testmagasságú betegek és gondozók számára is ideálisak.
- **Kényelmes fogantyúk:** A beteg és a gondozó számára egyaránt kialakított fogantyúk biztos fogást nyújtanak, az eszközt egyetlen gondozó is kezelheti. Formájuk megakadályozza, hogy fogás közben az alkar csontjai keresztezzék egymást, csökkentve az izmok terhelését.
- **Lábszártámasz:** A PU-kárpitozású, habszivacs térdtámasz megtámasztja a lábszárat az áthelyezés (például székből az eszközre), valamint a szállítás során.
- **Alacsony lábtartó (mindössze 4 cm magas):** Megkönnyíti a lábak stabilabb elhelyezését, és lehetővé teszi, hogy a beteg közelebb kerüljön a WC-hez vagy a kerekesszékekhez.
- **Stabil lábtartó:** A keskeny (35,5 cm széles), mégis stabil lábtartó megkönnyíti az eszköz közel helyezését, például a kerekesszékekhez.
- **Egyértelmű jelölések:** Jól látható jelzések mutatják a beteg lábfejének biztonságos és stabil helyzetét.
- **Dőlésszög:** A 74°-os előre dőlés megkönnyíti a beteg pozicionálását.
- **Kompakt és strapabíró:** Kis mérete ellenére stabil szerkezetű, szűk helyeken is egyenletes és könnyed manőverezhetőséget biztosít.

BEFEKTETÉS A KÉNYELEMBE ÉS A BIZTONSÁGBA

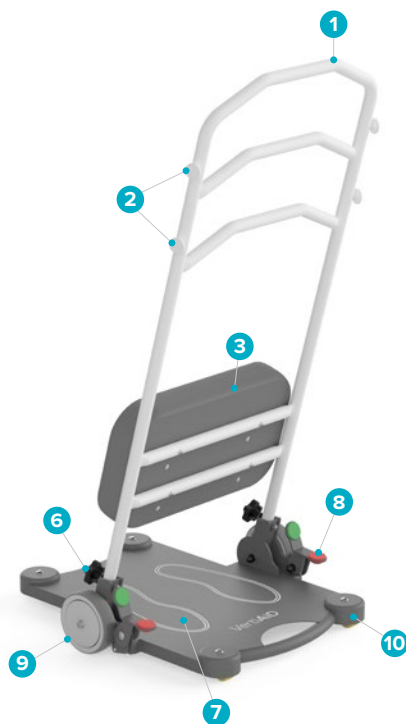

VertiAid Uni

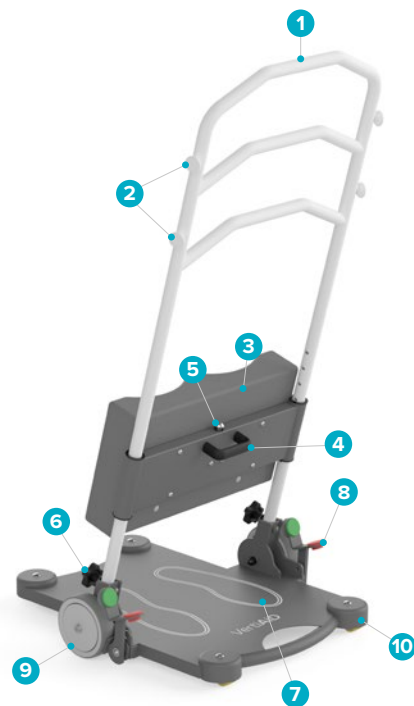

VertiAid

1. Fogantyú
2. Rögzítőcsapok a stabilizáló övhöz (két magasságban, mindkét oldalon)
3. Térdtámasz
4. Térdtámasz-állító fogantyú
5. Térdtámasz-állítás rögzítője

6. Rögzítőgomb
7. Lábtartó
8. Fék
9. Kerék Ø 12,5 cm
10. Kerék Ø 3,5 cm

MŰSZAKI ADATOK:

	VertiAid	VertiAid UNI
Hosszúság [cm]:		63
Szélesség [cm]:		57
Magasság [cm]:	116	116
A térdtámasz felső élének max. magassága [cm]:	63	54
A térdtámasz felső élének min. magassága [cm]:	40	45
Térdtámasz mérete (Sz x M) [cm]:		45,5 x 26,5
A fogantyú dőlésszöge a lábtartóhoz képest [°]:		74
Fordulókör átmérője [cm]:		75,1
Max. felhasználói testsúly [kg]:		≤ 170
Tömeg [kg]:	20,5	18,5
Tömeg csomagolással [kg]:	21,5	19,5

	VertiAid	VertiAid Uni
térdtámasz	8 fokozatú, egyenletes magasság-állítás, 8 szint, 40–63 cm tartományban, profilozott térdtámasz 	fix térdtámasz, 3 szintre áthelyezhető (45, 49,5 vagy 54 cm), sík térdtámasz 
	opció: sík térdtámasz a profilozott helyett 	opció: profilozott térdtámasz a sík helyett 
fékek	központi fékrendszer: egyszerre működik mindkét kerékre 	egyedi fékek (bal, jobb): a fékek külön-külön működtethetők 
	opció: egyedi fékek (bal, jobb): a fékek a központi fékrendszer helyett külön-külön működtethetők 	opció: központi fékrendszer: az egyedi (bal, jobb) fékek helyett egyszerre működik mindkét kerékre 

Mindkét eszköz összezsukható a szállításhoz.

A felső rész és a lábtartó külön, kartondobozba csomagolva kerül kiszállításra.

KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK:

Övek:



standard



**kiegészítő
megtámasztással**

Kétféle stabilizáló öv kapható: egy standard változat, valamint egy kiegészítő megtámasztással ellátott változat. Mindkettő az oldalsó rögzítőcsapokhoz csatlakoztatható.

Két méretben kapható: S/M vagy L/XL.

ÍGY RENDELHET EGYSZERŰEN:



PROFESSIONAL MEDICAL ENGINEERING